



HU

MOBIAKCARE®
M E D I C A L E Q U I P M E N T

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
KEREKESZÉK AGYBÉNULÁSBAN
SZENVEDŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE
"SAMMY"

REF: 0811312 & 0811313

CE

5/2021-ES VÁLTOZAT

RENDELTTETÉSE

Ezek a kerekesszékek fizikai vagy mentális fogyatékosággal élő, mozgáskorlátozott személyek számára készültek, kizárólag szállítás céljára.



MŰSZAKI ADATOK

KERET	Alumínium
SZÍN	Fekete
ÜLÉS	Megerősített szövet
OLDALLAP	Steady
LÁBTÁMASZ	Állítható hosszúság és dőlésszög
HÁTSÓ KERÉK	12" kompakt
ELSŐ KERÉK	8" x 2" kompakt (200x50mm)
FÉKEK	Hátsó kerekeken

MÉRETEK

0811312 0811313	30	32 cm	33 cm	50 cm	65 cm	80 cm	100 cm	53 cm	12"8"	60 kg	16,9 kg

ÖSSZESZERELÉS

Kérjük, olvassa el az **A. MELLÉKLETET**

SZIMBÓLUMOK

Kérjük, olvassa el a **B. MELLÉKLETET**

KARBANTARTÁS

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszékek élettartamát és hatékonyságát.

➤ HETENTE

- Ellenőrizze, hogy a keresztkar központi csavarja szorosan van-e meghúzva és jó állapotban van-e.
- Tisztítsa meg a szöveteket szappanos vízzel vagy más termékekkel.
- Tisztítsa meg a szék fém alkatrészeit száraz ruhával vagy krómfelületekhez vagy festett felületekhez készült speciális termékekkel.
- Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be őket.
- Ellenőrizze, hogy az első és hátsó kerekek nem sérültek-e.

➤ NEGYEDÉVES

- Kenje meg vagy olajozza be az összes súrlódásnak vagy kopásnak kitett alkatrészt.
- Húzza meg a csavarokat és anyákat.
- Az elnök státuszának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások elvégzése.

➤ ÉVENTE

Javasoljuk, hogy évente egyszer egy képzett szervizelési szolgáltató végezzen teljes átvizsgálást. A beteg fizikai biztonsága érdekében azt javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőriztesse a gyártóval. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

TISZTÍTÁS

A karbantartás és ellenőrzés mellett a váz és a szövet is alaposan megtisztítható.

- A szövet megjelenésének megőrzése érdekében azt rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe tisztítószerrel, meleg vízzel lehet eltávolítani, a textúra irányába haladva.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- Ne tegye a szövetet szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A vázat rendszeresen tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel.
- A bőr ülésű kerekesszékeket száraz ruhával kell tisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. Veszélyes a kerekesszéket nedves kerekkel használni.

FONTOS!

A kerekesszék felépítése úgy lett kialakítva, hogy maximális biztonságot nyújtson. Azonban a felhasználók veszélybe kerülhetnek, ha a kerekesszéket nem megfelelő módon használják. A saját biztonsága érdekében be kell tartania az alábbi szabályokat. A nem megfelelő vagy helytelen beállítások növelhetik a balesetek kockázatát.

- Sötét helyeken mindig világos színű ruhát viseljen, hogy mások könnyebben észrevegyék.
- Legyen óvatos az első útján ezzel a kerekesszékkal.
- Ismerje meg a kerekesszéket.
- Használja a kerekesszéket sík terepen, valamint emelkedőn és lejtőn is.
- Ne próbáljon meg olyan tárgyakat elérni, amelyeket a térde között kell felemelnie a padlóról.
- Ne próbáljon meg tárgyakat elérni, ha ehhez a ülésre kell átülnie.
- Ne használja közutakon vagy autópályákon.
- Ne próbáljon meg víz, jég vagy olajréteg jelenlétében fel- vagy leereszkedni.
- Ne használjon a gyártó által jóvá nem hagyott alkatrészeket, kiegészítőket vagy adaptereket.
- Ne álljon fel a kerekesszékben.
- Ne használja az oldalsó táblát platformként a kerekesszékbe való be- és kiszálláskor.

A kerekesszékbe való beülés

- Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb magához
- Támaszkodjon a karjaival a vázra, és lassan ereszkedjen le az ülésre.
- Engedje be a kerekek rögzítőit

Kerekesszékből való kiszállás

- Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre át akar ülni.
- Helyezze át testsúlyát az ülésre

A kerekesszékkal való mozgás közben ne felejtse el!

Mindig használjon lifteket és rámpákat. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével juthat el céljához. A kísérőknek a kerekesszéket biztonságosan rögzített területeken kell megfogniuk. A kerekesszéket soha nem szabad utasnak emelnie. Csak tolni szabad.

FIGYELMEZTETÉS

Probléma esetén ne használja a kerekesszéket, amíg a probléma meg nem oldódik.

- Ne használja a terméket a kézikönyvben nem feltüntetett célra.
- A gyártó nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából eredő következményekért.
- A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül módosítsa.
- Kérje orvosa vagy terapeutája tanácsát a kerekesszék helyes beállításának és használatának meghatározásához.
- Ne engedje, hogy gyermekek a kerekesszéken játsszanak.
- Ne próbálja meg a kerekesszéket eltávolítható alkatrészeknél megemelni.
- Tartsa a becsomagolt kerekesszéket hőforrásoktól távol.
- A kerekesszékbe való be- és kiszállás önállóan is elvégezhető, feltéve, hogy rendelkezik megfelelő mozgékonyssággal és felsőtest erejével.



KÖRNYEZETVÉDELLEM

Ha egy napon úgy találja, hogy termékét ki kell cserélni, vagy ha már nincs szüksége rá, gondoljon a környezet védelmére:

- 1) Ne dobja a terméket a többi háztartási hulladékkal együtt (ez a jelentése a feltüntetett újrahasznosítási jelnek is).
- 2) Vegye fel a kapcsolatot a hatóságokkal, akik tájékoztatni fogják Önt azokról az újrahasznosító központokról, ahol termékeit el kell helyeznie.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosításához.

Garancia:

Kerekesszékére 2 év garancia vonatkozik.

A garancia gyári hibákra vonatkozik, és NEM terjed ki a helytelen használat, a nem megfelelő karbantartás, a módosítás, a túlzott használat vagy a termék használati utasításának be nem tartása miatt bekövetkezett hibákra. A garancia NEM terjed ki az olyan kopó alkatrészekre sem, mint a fékek, szíjak, pántok, kerékaabroncsok és minden más, ami használat vagy idő múlásával megsérülhet. A garancia nem terjed ki a következő okokból bekövetkezett károkra vagy hibákra: természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, áramellátási problémák (ahol ilyen van), szállító cégek. A garanciális áruk szállítási költségeit az ügyfél vagy a kereskedő viseli.

JÓTÁLLÁSI IGÉNYLŐLAP

VEVŐ ADATAI			
TELJES NÉV:			
VÁSÁRLÁS DÁTUM:		TELEFON	
ELADÓ ADATAI			
TELJES NÉV		CÍM	
TEL		ALÁÍRÁS ÉS ALÁÍRÁS	

E.C. Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk, hogy kijelentsük, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázatú osztályba (I. osztály) tartoznak, és megfelelnek az 745/2017 európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

MOVIAK A.E.

Kathiana, Akrotiri,
Chania, Crete

+30-28210-63222

www.mobiakcare.com



ÖSSZESZERELÉS ANNEX A.

Nyissa ki a csomagot ->



Vegye ki az összes alkatrészt a dobozból ->



Az üléstámaszra gyakorolt egyszerű nyomásra a kerekesszék kinyílik. Tipikus kattató hang hallható.



Amikor a kerekesszék biztosított. A következőképpen néz ki.



Ezután helyezze az ülést a kerekesszék megfelelő rétegeibe.



Helyezze a piros üléstartókat a megfelelő helyre mindkét oldalon.



A két gomb egyidejű
megnyomásával
a tolókar a megfelelő
helyzetbe kerülhet.






Helyezze fel a háttámla hosszabbító burkolatát, miután áthaladt a megfelelő pozíciókból származó zónán. A műanyagnak is át kell haladnia a fém részből.


Helyezze fel a lábosztót



Az anyák lazítása után
lehetőségünk van a fejtámla
magasságának beállítására.

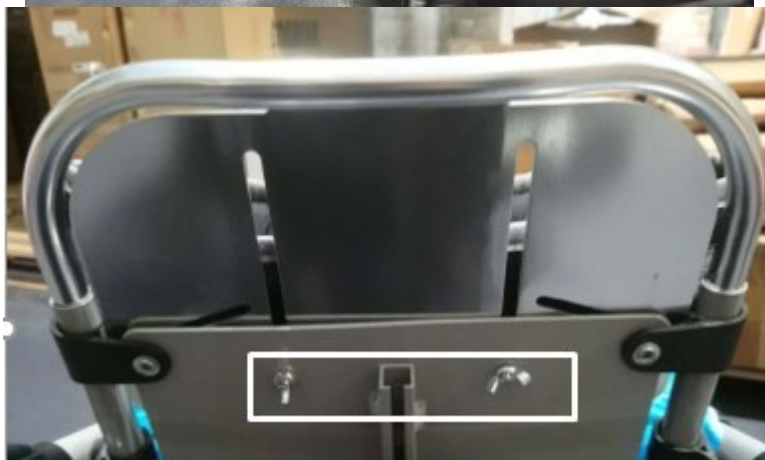



A dőlésszög-szabályozó
lazításával a kívánt
helyzetbe állíthatjuk az ülést.

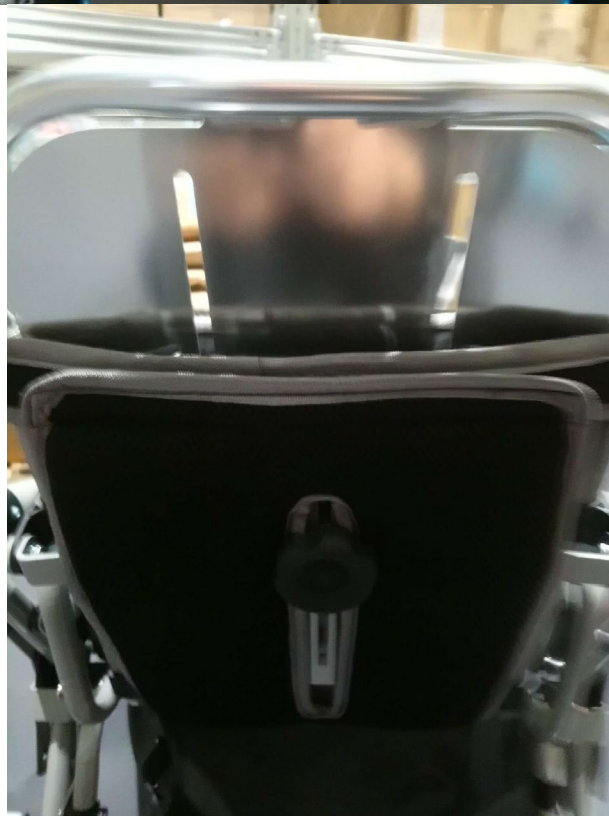



A dönthető árnyékolót
az adapterek keretéhez
nyomásával rögzítheti.

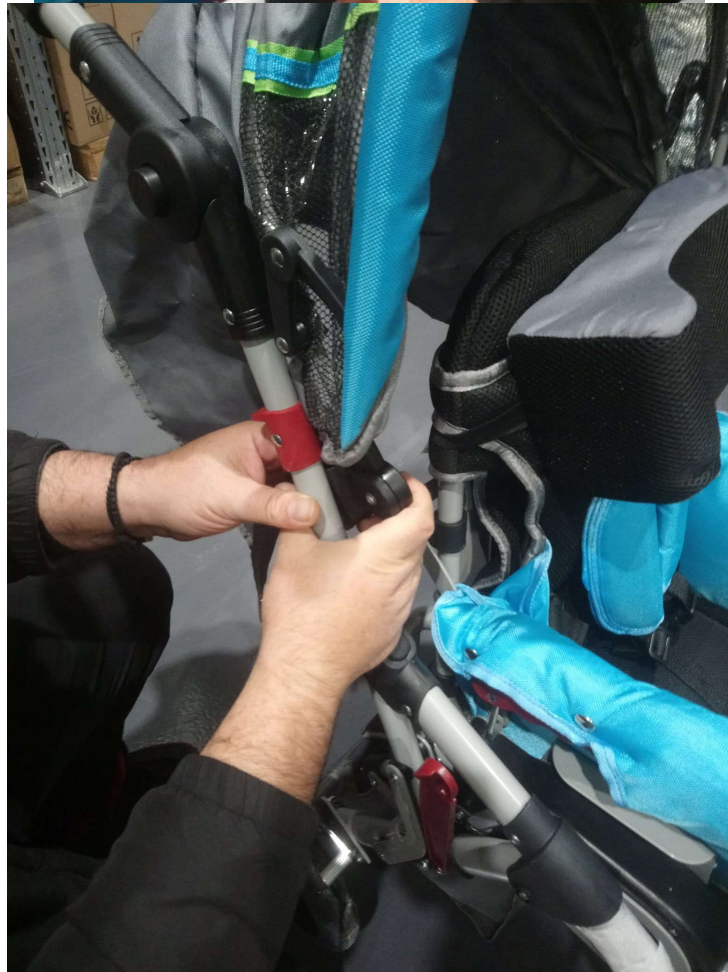

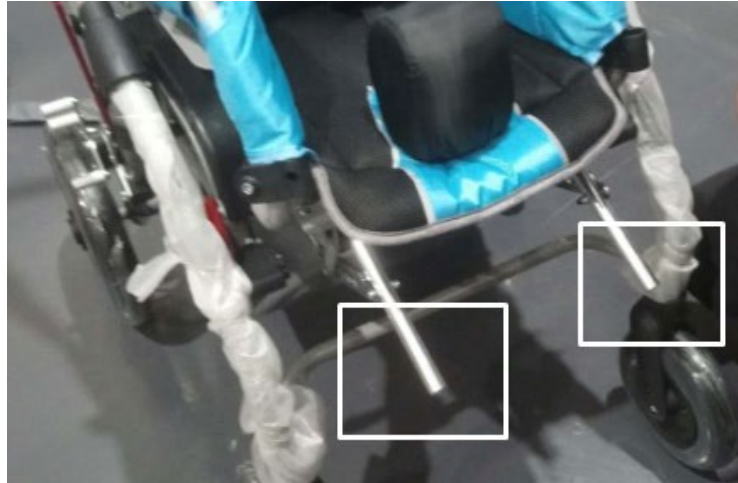

Helyezze a lábtartókat ebbe a pozícióba.
A dőlésszöget a választógombbal lehet beállítani.



A kerekesszék
használatra kész.



B. MELLÉKLET. SZIMBÓLUMOK

A címkén, a fő dobozon és/vagy a felhasználói kézikönyvben nyomtatott szimbólumok leírása



Orvostechnikai eszköz



Gyártó



Termékszám



Sorozatszám



Tételszám



Szárazon tartandó



Óvatosan kezelendő



Csak beltéri használatra



CE Jelölés



Gyártási dátum



Olvassa el a használati utasítást



Ne használja, ha a csomagolás sérült



Megfelelő irányban



Rakodási magasság



Törékeny



Elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv

MOVIAS S.A

Kathiana Akrotiriou
Chania-Crete, Greece

+30-28210-63222

www.mobiakcare.com

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est. 1977