



### Basic IV transzport kerekesszék

0810170

### FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ: KERESSZÉK 12" ÉS 8" HÁTSÓ KERÉKEK



#### RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT:

Ezeket a kerekesszékeket mozgásukban korlátozott fizikai vagy szellemi fogyatékos emberek számára tervezték. Lehetővé teszi mozgássérültek vagy mozgásukban korlátozott személyek szállítását, és a beteg maga (ha van 20-24"-es hátsó kerékei) vagy kísérő segítségével mozgásra használható.

Ha a kerekesszék 50-60 cm átmérőjű hátsó kerékekkel és a keréken lévő kézi peremmel rendelkezik, a felhasználó önállóan mozoghat.

Ha a kerekesszék 13-40 cm átmérőjű hátsó kerékekkel rendelkezik, és nincs kézi perem a keréken, akkor a felhasználónak egy kísérőre van szüksége, aki a kerekesszéket a kerekesszék hátulján található fogantyúkon keresztül mozgatja.

## MŰSZAKI ADATOK

Lásd az A. MELLÉKLETET  
MÉRETEK

Lásd a B. MELLÉKLETET  
ÖSSZESZERELÉS

Lásd az A. MELLÉKLETET  
SZIMBÓLUMOK

Lásd a B. MELLÉKLETET

### ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK:

- Ha nem olvassa el ezt a használati útmutatót, jobb, ha nem használja ezt a terméket vagy más elérhető alkatrészt. Ha nem érti a használatot vagy az óvintézkedéseket, forduljon a kereskedőhöz vagy a megfelelő műszaki személlyel a termék használata előtt, mert kárt okozhat.
- Tartsa távol a terméket hőforrásoktól.
- Legyen óvatos, ha gyerekek vannak a közelben, és ne engedje, hogy a gyerekek játszanak a termékkel.
- Ne lépje túl a maximális hasznos terhelést.
- Mindig különös elővigyázatosság szükséges, ha olyan mozgó alkatrészek vannak, amelyek a végtag becsípődését és sérülését okozhatják.
- Ne kísérelje meg felemelni a kerekesszéket semmilyen eltávolítható résznél fogva.
- A kerekesszékebe való be- és kiszállás önállóan is végrehajtható, feltéve, hogy megfelelő mozgásképességgel és felsőtest-erővel rendelkezik.

### FONTOS!

Ennek a kerekesszéknek a felépítése a maximális biztonságot szolgálja. A felhasználók azonban veszélybe kerülhetnek, ha nem megfelelő kerekesszéket használnak. Saját biztonsága érdekében a következő szabályokat kell betartani. A nem meghatározott vagy helytelen beállítási munkák növelhetik a balesetek kockázatát.

- Mindig viseljen világos színű ruhát, ha sötét helyen mozog, hogy másoktól könnyebben elérhető legyen.
- Legyen óvatos az első edzés során ebben a kerekesszékben.
- Ismerje meg kerekesszékét.
- Használja tolószékét vízszintes talajon, valamint emelkedőn és lejtőn.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha térdei közé nyúlva kell felemelnie azokat a padlóról.
- Ne próbálja meg tárgyakat elérni, ha az ülésre kell felmennie.
- Ne használja utakon vagy autópályákon.
- Ne kíséreljen meg felmászni vagy leereszkedni vízzel, jéggel vagy olajréteggel.
- Ne használjon a MOBIÁK által jóváhagyottaktól eltérő, nem engedélyezett alkatrészeket, tartozékokat vagy adaptereket.
- Ne álljon a tolószékben.

### HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Ellenőrizze, hogy a keret nem sérült-e, hogy garantálja a termék biztonságos használatát. (Nincs repedés vagy törés a kereten)
2. Ellenőrizze, hogy a termék megfelelően van-e összeszerelve.
3. Ellenőrizze, hogy az ülés teljesen nyitva van-e. Ha nem, nyomja le az ülést az oldalsó keretről.
4. Ellenőrizze, hogy a fék megfelelően működik-e.
5. Mindig ellenőrizze a mechanikus alkatrészek kopásának állapotát, hogy biztosítsa a termék abszolút biztonságos használatát emberek és tárgyak számára.
6. Ha vannak gyorskioldó tengelyek, ellenőrizze, hogy azok megfelelően vannak-e rögzítve.

7. Ellenőrizze a gumiabroncsokat, a gumiabroncsok nyomását (ha szükséges) és a kerékszárakat (fékeket). A fékek nem működnek megfelelően, ha túl alacsony a nyomás, vagy túl hosszú a rés a gumiabroncs és a kerékszárak között.

#### FIGYELEM!

A következő módszereket csak tapasztalt betegeknél szabad alkalmazni. Ha nem tapasztalt, kérjen segítséget egy kísérőtől.

#### FELÜLÉS A KERESŐSZÉKBE:

1. Helyezze el a kerekesszéket a lehető legközelebb magához.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Karjával támaszkodjon a keretre, és lassan menjen le az ülés felé.

#### KIÁLLÁS A KERESŐSZÉKBŐL:

1. Helyezze a kerekesszéket a lehető legközelebb ahhoz az üléshez, amelyre átszáll.
2. Kapcsolja be a kerékszárakat.
3. Egyformán támaszkodnia kell mindkét fogantyúra. Csak az egyik kéz megtámasztása (és felügyelet nélkül) sérülést okozhat.
4. Helyezze a testsúlyt az áthelyezni kívánt ülésbe.

#### EGYÉB UTASÍTÁSOK:

1. Mindig használjon felvonót és rámpát. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, két kísérő segítségével érheti el a célt. A kerekesszéket a keret stabil részeinél fogva kell emelniük. A tolószéket soha nem szabad felemelni, amíg az utas ül. Csak tolni szabad.
2. Kerülje a lépcsőket vagy az akadályokat, ellenkező esetben kérjen segítséget a kísérőtől:
3. Ez a kerekesszék kizárólag személy szállítására használható az ülésen.
4. A felhasználók semmilyen közlekedési eszköz használata közben ne üljenek tolószékben.
5. A kerekesszék hátsó kerekein fék található, amelyet rögzíteni kell, amikor a kerekesszék nem mozog.
6. NE nyomja a lábtartókat, hogy üljön vagy felálljon, FELKÜLÉS VESZÉLYE. A lábtartókat a felhasználó használja, amikor ül.
7. NE érintse meg a mozgó alkatrészeket mozgás közben SÉRÜLÉSVESZÉLY

#### KARBANTARTÁS:

Az alábbi eljárások rendszeres felülvizsgálata segít megőrizni kerekesszék élettartamát és hatékonyságát.

#### HETI

1. Ellenőrizze a keréknyomást a kerekeken lévő utasításokat követve.
2. Ellenőrizze, hogy a keresztirányú kar központi csavarja meg van-e húzva és jó állapotban van.
3. Tisztítsa meg a szövetet szappanos vízzel vagy megfelelő mennyiségű tisztítószerezrel.
4. Tisztítsa meg a szék fém részeit száraz ronggyal vagy speciális króm felületekre vagy festett felületekre alkalmas szerekkel.
5. Ellenőrizze a kerékcsavarokat, és szükség esetén állítsa be.
6. Ellenőrizze, hogy nem sérültek-e az első és a hátsó kerekek.

#### NEGYEDÉVENKÉNT

1. Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be: kerékvillák, húzókerekek, légcsoncsok.
2. Zsírozzon vagy olajozzon minden alkatrészt, amely súrlódásnak vagy kopásnak van kitéve.
3. Húzza meg a csavarokat és az anyákat.
4. A szék állapotának általános felülvizsgálata és a szükséges javítások.

## ÉVENTE

1. Javasoljuk, hogy évente egyszer végezzen teljes körű felülvizsgálatot szakképzett szolgáltatóval.
2. A páciens biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a kerekesszéket 2 évente ellenőrizze a gyártó. Javítás esetén csak eredeti alkatrészeket használjon.

## TISZTÍTÁS:

A karbantartás és az ellenőrzés mellett a keret és a kárpit is alaposan megtisztítható.

- Annak érdekében, hogy megőrizze megjelenését, az anyagot rendszeresen tisztítani kell.
- A szennyeződések szivaccsal és enyhe mosószerrel lehet eltávolítani meleg vízzel, a textúra irányába söpörve.
- Öblítse le tiszta vízzel, mielőtt megszáradna.
- NE hagyja nedvesen a kerekesszéket.
- Ne tegye az anyagot szárítógépbe. Ha a szennyeződés mély, a felületet puha kefével kell megtisztítani.
- A keretet rendszeresen tisztítani kell enyhe tisztítószerrel.
- A bőrülékes kerekesszéket száraz ruhával kell megtisztítani.
- Tisztítsa meg a kerekeket meleg vízzel és enyhe szappannal. Ügyeljen a kerekek szárítására. veszélyes a tolószék használata nedves kerekkel.
- Ha fertőtlenítenie kell a terméket, használjon szokásos, enyhe fertőtlenítőt.
- Védje a tárgyat a karcoktól, vágásoktól és szúrásoktól.

## VIGYÁZAT (!):

- A termék sérülése vagy meghibásodása esetén NE használja a terméket, és forduljon a hivatalos és képzett képviselőhöz.
- Ne használja a terméket olyan célra, amely nem szerepel ebben a kézikönyvben
- A MOBIAS S.A elhárít minden felelősséget a termék helytelen használatából és a termék keretének jogosulatlan megváltoztatásából eredő következményekért.
- A MOBIAS S.A fenntartja a jogot a jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására
- Van egy  $\pm 3\%$ . Eltérés a termékek méretétől.

## KÖRNYEZETVÉDELME

Ha egy nap úgy találja, hogy a terméket ki kell cserélni, vagy már nem működik az Ön számára, fontolja meg a környezet védelmét:

- 1) Ne dobja ki a terméket a többi közszeméttel együtt (ezt jelenti a látható újrahasznosítási tábla is).
- 2) Lépjen kapcsolatba a hatóságokkal, és ők tájékoztatják Önt arról, hogy mely újrahasznosítási központokba kell leadni a terméket.
- 3) A termék megfelelő ártalmatlanítása elősegíti a környezet védelmét, valamint a termék alkatrészeinek újrahasznosítását.

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Kizárólag mi vagyunk felelősek annak kinyilvánításáért, hogy az ebben a nyilatkozatban említett orvostechnikai eszközök alacsony kockázati osztályba tartoznak (I. osztály), és megfelelnek a 745/2017/EK európai rendelet követelményeinek, valamint adott esetben a hivatkozott szabványoknak és jogszabályoknak.

## ESEMÉNY JELENTÉS:

Az eszköz használatával kapcsolatos minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy beteg lakóhelye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

## GARANCIA:

A termékre a vásárlás dátumától számított két (2) év garancia vonatkozik.

A garancia a gyári hibákra vonatkozik, ÉS NEM TARTALMAZZA azokra a károokra, amelyek helytelen használatból, nem megfelelő karbantartásból, módosításból, túlhasználatból vagy a termék használati utasításának be nem tartásából erednek. NEM takarja el azokat az alkatrészeket, amelyek használat közben vagy idővel elhasználódhatnak, mint például a kárpit, a kerekek vagy a fékek. Természeti katasztrófák, jogosulatlan karbantartás vagy javítás, ellátási problémák (adott esetben), fuvarozókra nem vonatkozik a garancia.

Semmilyen szervizre vagy pótalkatrészre nem terjed ki a fedezet, kivéve, ha azokat egy felhatalmazott szerviz vagy a termék gyártója ellenőrizte. A garanciális termékek szállítási költségeit a felhasználó-vevő vagy a kereskedő fizeti.

#### A. MELLÉKLET ELŐÍRÁSOK

##### 0810170 BELTÉRI KEREKESZÉK „BASIC” IV

KERET: ACÉL

KERET: ÖSSZECSUKHATÓ

SZÍN: FEKETE

ÜLÉS: PVC BŐR

KARTÁMASZOK: RÖGZÍTETT

HÁTSÓ KEREKEK: 12” SZILÁRD

ELÜLSŐ KEREKEK: 8”X1” (200X25mm)

KÍSÉRŐ FÉKEK: NINCS

MAX. TEHERBÍRÁS: 100 kg

EXTRA: BIZTONSÁGI ÖVVEL ELLÁTVA

MEGEMELHETŐ LÁBTARTÓK: NINCS

I.V STAND: OPCIONÁLIS KÓD: 0810794, 0808297

OXIGÉN PALACKTARTÓ: OPCIONÁLIS KÓD: 0808516

POHÁRTARTÓ: OPCIONÁLIS KÓD: 0811376

NÁD-MANKÓ TARTÓ: OPCIONÁLIS KÓD: 0811369















**0810170**



**0810170**

## B. MELLÉKLET MÉRETEK

												
<b>0810170</b>	46 cm	50 cm	40 cm	40 cm	64 cm	92 cm	89 cm	49 cm	12" 8"	100 Kg	16 Kg	
<b>0806778</b>	46 cm	45 cm	40 cm	40 cm	62 cm	94 cm	89 cm	50 cm	12" 8"	100 Kg	16 Kg	
<b>0807985</b>	46 cm	44 cm	44 cm	37 cm	62 cm	92 cm	90 cm	55 cm	12" 8"	100 Kg	21 Kg	
<b>0808377</b>	41 cm	441 cm	36 cm	38 cm	48 cm	85 cm	85 cm	47 cm	8" 5"	75 Kg	09 Kg	

## C. MELLÉKLET ÖSSZESZERELÉS

A tolósék, amelyet a kezében tart, eltérhet a következő képeken láthatótól. Az összeszerelési folyamat hasonló.

Nyitás: Fogja meg a fogantyúkat és húzza kifelé, majd nyomja le az ülés oldalán lévő rudakat, amíg a kerekesszék teljesen ki nem nyílik.



Bezárás: Kövesse a fordított eljárást.






Szerelje össze a lábtámaszt úgy, hogy az alkatrészen lévő zsanérlemezeket a kerekesszék vázán lévő csuklócsapokra szerelje. Nyomja a lábtámaszt a kerekesszék belseje felé, amíg a helyére nem kattán. Ismétlje meg ugyanezt az eljárást a másik lábtámasznál.  
Távolítsa el a lábtámaszt a kioldókar megnyomásával, forgassa kifelé, emelje le a lábtámaszt a csuklócsapszegekről.

A fékek a kerekesszék rögzítésére szolgálnak, ha az álló helyzetben van, hogy megakadályozza az elgurulást.

A fék bekapcsolásához nyomja előre a fékkart a tenyérrel. (1)

A fék kioldásához húzza hátra a fékkart az alsó ujjakkal (2)

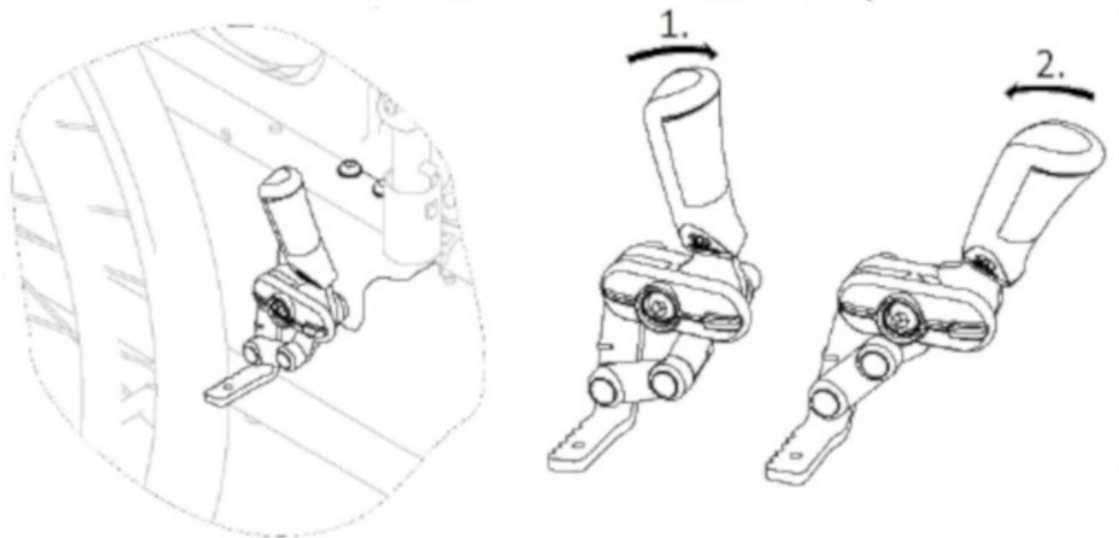


Soha ne húzza be a rögzítőféket mozgás közben.

Ne húzza be a rögzítőféket, hogy lelassítsa a kerekesszéket.

Ne támaszkodjon a rögzítőfékekre támaszkodás vagy áthelyezés céljából.

Fék használata közben tartsa távol ujjait a mozgó alkatrészekről, kezét mindig a fékkaron tartsa.

A lábtámasz hosszának beállításához használja a termékcsomaghoz mellékelt szerszámot. Lazítsa meg a csavart, és rögzítse a kívánt hosszúságra.

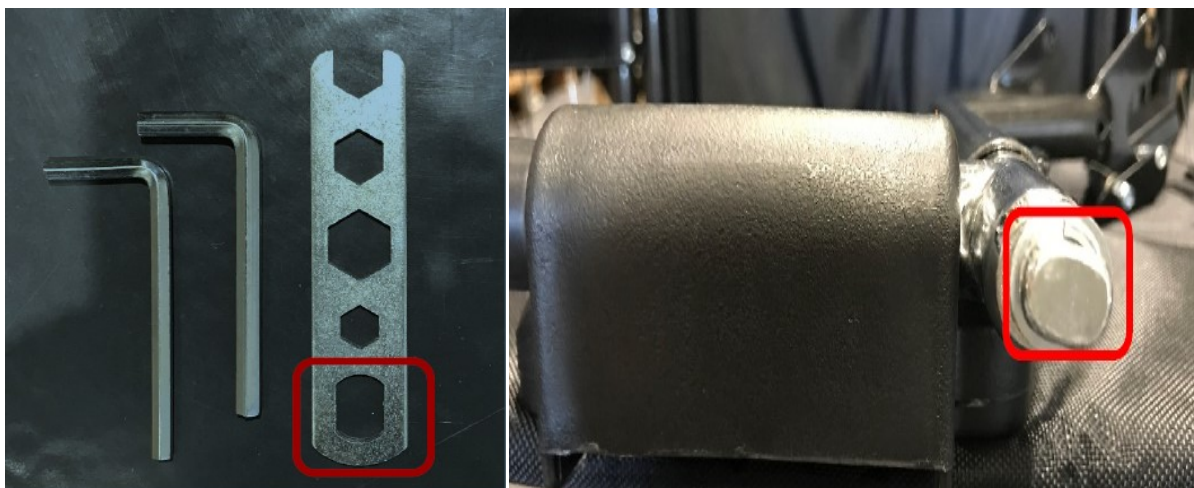

Használja a mellékelt lábtámasz övet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a beteg lába megfelelően helyezkedik el.



Ha a lábtámasznak van emelő funkciója, ne használja az övet. A lábtámasz felfelé vagy lefelé mozgatásához nyomja előre a kart, és emelje fel vagy engedje le, az alsó résztől tartva. Ezt a funkciót biztonsági okokból csak a kezelőtől ajánlott elvégezni, és nem maga a felhasználó.




A kerekesszék biztonsági övvel is felszerelhető. Megakadályozza, hogy a felhasználó lecsússzon a kerekesszékben vagy kiessen a kerekesszékéből.  
A laza öv lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy lecsússzon, és fulladásveszélyt jelenthet



Győződjön meg arról, hogy teljesen hátra ül az ülésben, és hogy a medence a lehető legegyenesebb és szimmetrikusabb legyen.

A záráshoz nyomja be az A reteszt a B csat kapcsába.

TA kinyitáshoz nyomja meg a C gombot, és húzza ki az A reteszt a B csatkapocsból.

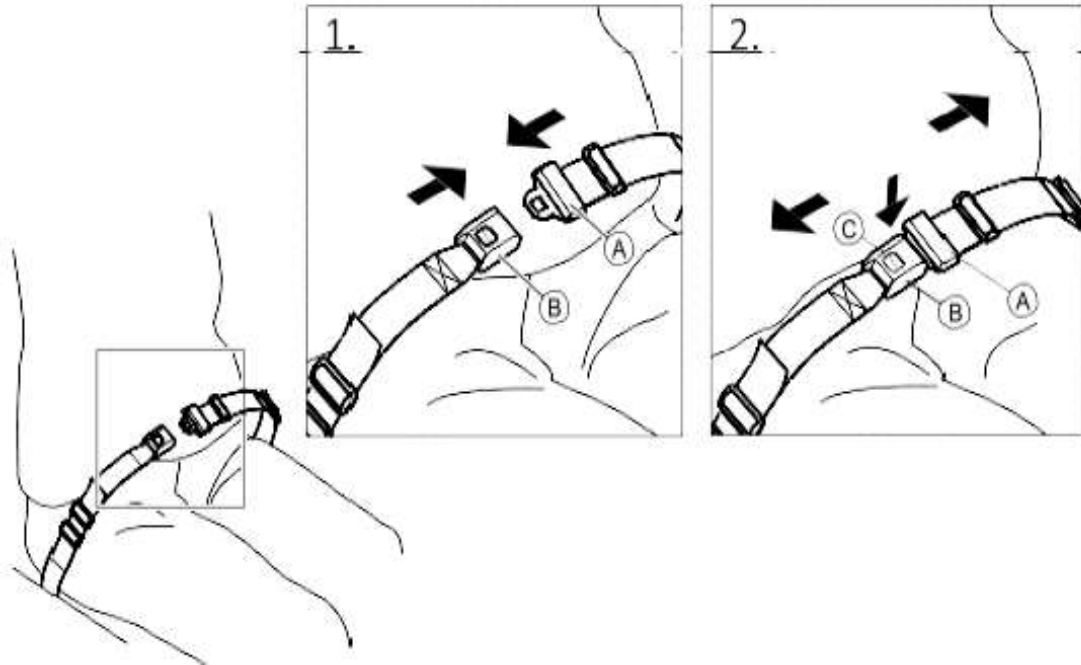

## D. MELLÉKLET SZIMBÓLUMOK



Orvosi eszköz



CE jelölés



Gyártó



Gyártási dátum



Termék szám



Olvassa el a használati utasítást



Széria szám



Ne használja ha a csomagolás sérült



Tétel szám



Pontosan felfelé



Egyedi  
eszközzazonosító



Napfénytől távol  
tartandó



Tartsa szárazon



Rakodási magasság



Óvatosan kell kezelni



Törékeny



Kizárólag beltéri  
használat



Berendezési irányelv



MOBIAC S.A  
ΚΑΘΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ  
KATHIANA AKROTIRIOU CHANIA - CRETE  
T: +30 28210 63222 | WEB: [www.mobiakcare.com](http://www.mobiakcare.com)