



## **Respirain légzés tréner Kyara**

**ST586**

### **HASZNÁLATI UTASÍTÁS**



I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelte alapján (2017 április 5)

A MORETTI SpA saját felelősségére kijelenti, hogy a MORETTI SpA által gyártott és forgalmazott, valamint a LÉGZÉSI ÖSZTÖNZŐK családjába tartozó termékek Megfelelnek a 2007/47-es irányelvvel módosított 93/42/EGK ORVOSI KÉSZÜLÉKEK irányelv vonatkozó rendelkezéseinek és a következő nemzetközi szabványoknak  
UNI CEI EN ISO 14971: 2009 Orvosi eszközök kockázatkezelésének alkalmazása  
UNI EN 980: 2009 Az orvosi eszközök címkézésére használt grafikus szimbólumok  
Ebből a célból a MORETTI SpA a következőket garantálja és kizárólagos felelősségére kijelenti:

1. A kérdéses eszközök megfelelnek a (EU) 2017/745 irányelv I. mellékletének alapvető követelményeinek, amint azt a fent említett irányelv VII. melléklete előírja.
2. A szóban forgó eszközök teljes listája e nyilatkozat A. mellékletében található.
3. A szóban forgó készülékek NEM MÉRŐMŰSZEREK.
4. A szóban forgó eszközöket NEM SZÁNTAK KLINIKAI VIZSGÁLATOKRA.
5. A kérdéses eszközöket NEM STERIL csomagolásban értékesítjük.
6. A kérdéses eszközöket az I. osztályba tartozónak kell tekinteni.
7. A MORETTI SpA az utolsó tétel gyártási dátumától számított legalább 8 évig megőrzi és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátja a (EU) 2017/745 irányelvnek való megfelelést igazoló műszaki dokumentációt.

#### A. MELLÉKLET – AZ ORVOSI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE

Család: LÉGZÉSI ÖSZTÖNZŐK

<b>KÓD</b>	<b>LEÍRÁS</b>
ST586	Respirain légzésstimulátor

Rendeltetésszerű használat:

Légzésstimuláló készülék

#### Főbb jellemzői

Innovatív rendszer a belégzéssel történő légzés ösztönzésére. Alapból és háromkamrás testből áll, benne három különböző színű és súlyú gömbbel. Belégzéssel a három gömb az elért belégzés erejével arányos szinttel megemelkedik.

A három gömb mozgásának látása lehetővé teszi a kifejtett erőfeszítés számszerűsítését és a kezelőorvos által jelzett gyakorlat tényleges hatékonyságának megállapítását. Kivehető a könnyebb tisztítás érdekében

## Termék kép



GYÁRTÓI REFERENCIÁK	
93/42 gyártó szerint	MORETTI SPA
Gyártó ország	OLASZORSZÁG
GMDN kód	31266
CND kód	Y030327
93/42 Készülékosztály	I. osztály
FŐ ANYAGOK	
Szerkezet	Kopolimer és polisztirol
Szopóka	polietilén
Alap és gömbök	Nem mérgező polipropilén
KAPACITÁS	
Vörös gömb	600 cc/s
Sárga gömb	900 cc/s
Zöld gömb	1200 cc/s


## LÉLEGZÉS

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- 1) Lélegezz be alaposan, amíg a lehető legtöbb gömböt meg nem emeled.
- 2) Tartsa meg az ihletet, ameddig csak lehetséges.
- 3) Távolítsa el a szájrészt, és lélegezzen ki. Ismétlés. A kilégzéshez fejjel lefelé is fordíthatjuk a respitrait.

### FOGALMAZÁS

- Átlátszó központi rész 3 kamrára osztva kopolimerből és nem mérgező polisztirolból (minden kamra kifejezi a belégzési érték másodpercenként: 600, 900 és 1200cc)
- Nem mérgező polipropilén alap
- 3 nem mérgező polipropilén gömb
- Polipropilén cső szájrészsel

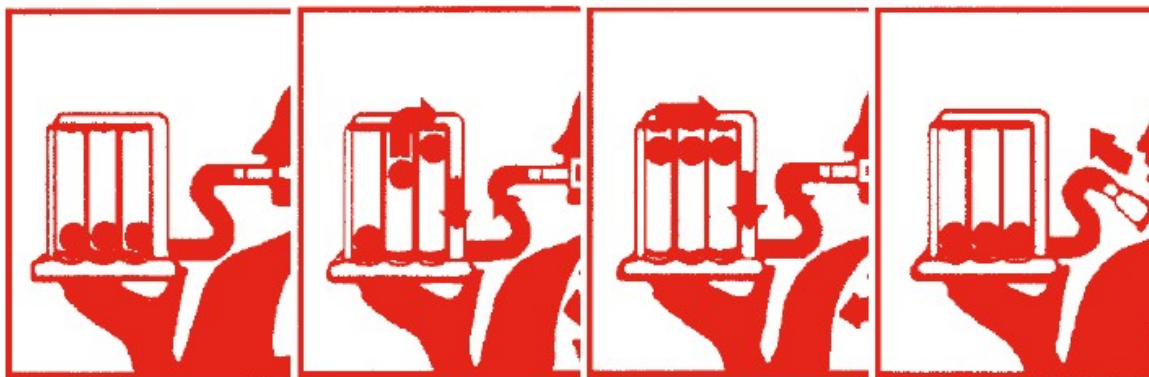

1

2

3

- 1) Lélegezzen be alaposan, amíg a lehető legtöbb gömböt meg nem emeli
- 2) Tartsa a lézőkészüléket, ameddig csak lehetséges
- 3) Távolítsa el a szájrészt, és lélegezzen ki. Ismétlés. A kilégzéshez fejjel lefelé is fordíthatjuk a respiraint



**MORETTI S.p.A.**  
Via Bruxelles, 3 – Melego  
52022 Cavriglia (Arezzo)  
Tel. +39 055 96 21 11  
Fax. +39 055 96 21 200

[info@morettispa.com](mailto:info@morettispa.com)  
[www.morettispa.com](http://www.morettispa.com)  
P. IVA 00306090515  
Meccanografico AR 005370

Reg. Imp. Arezzo 3932  
R.E.A. 68869  
Cap. Soc. € 500.000  
C/C Postale 13682521